

---

dermo prime  
**dp**lite2

---

## MANUAL DEL EQUIPO

MA33-01/B  
02/12/2014

---

**DAVI & CIA**  
[www.davicia.com](http://www.davicia.com)

---



## INDICE

---

1.	DESCRIPCIÓN .....	3
2.	LISTADO DE COMPONENTES .....	4
3.	PUESTA EN MARCHA.....	5
4.	UBICACIÓN Y ENTORNO .....	5
5.	FUNCIONAMIENTO .....	5
6.	INDICADORES.....	6
6.1.	EN LA BASE DE CARGA .....	6
6.2.	EN LA CAMARA.....	6
7.	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	6
7.1.	DESECHO DEL EQUIPO .....	7
8.	DATOS TÉCNICOS .....	8
8.1.	CÁMARA.....	8
8.2.	COMUNICACIÓN WIFI.....	8
9.	CERTIFICADO DE GARANTIA.....	9


## 1. DESCRIPCIÓN



Base de carga, vista superior



Cámara, vista posterior

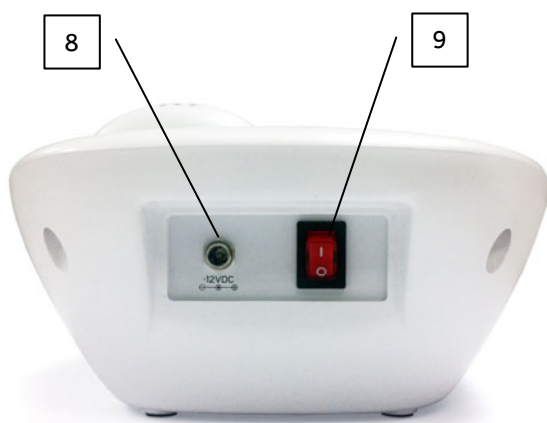

Base de carga, vista posterior



Cámara, vista frontal

- (1) Alojamiento para indicadores de sebo
- (2) Lámpara UV
- (3) Conectores de carga para la batería de la cámara
- (4) Indicadores del estado de la batería
- (5) Indicador del modo de captura
- (6) Botón Play / Pause

- (7) Interruptor de la cámara Wifi
- (8) Conexión de la alimentación
- (9) Interruptor
- (10) Sensores de hidratación
- (11) Sujeción de la óptica
- (12) Conexión de carga de la batería (unir a la base de carga)

## 2. LISTADO DE COMPONENTES

---



EQUIPO dplite2

---



Base de carga (x1)



Cámara (x1)



Adaptador 12VDC (x1)



Indicadores de sebo (x50)



Manual del usuario

### 3. PUESTA EN MARCHA

---

- Conectar el equipo a la fuente de alimentación (8)
- Encienda el equipo (9)
- Encienda la cámara Wifi (7)
- Los LED de la batería (4) de la cámara se encienden automáticamente.
- A continuación, debe esperar hasta que los indicadores de modo de captura de la cámara (5), se iluminen en naranja, verde y azul.
- Ahora el equipo está listo para funcionar.

### 4. UBICACIÓN Y ENTORNO

---

Por favor, siga las instrucciones:

- No utilice este aparato cerca del agua.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- NUNCA coloque este dispositivo encima de otros equipos eléctricos o superficies inclinadas.
- Mantenga este dispositivo alejado de la luz directa del sol, el calor o las llamas.

### 5. FUNCIONAMIENTO

---

Consulte el Manual del software de la versión correspondiente.

AVISO	
<b>Acerca de la temperatura del dispositivo:</b>	
El dispositivo puede calentarse debido al uso continuo, pero no es un mal funcionamiento.	
<b>Sobre la protección de sobrecalentamiento:</b>	
Dependiendo de la temperatura del dispositivo, es posible que no pueda tomar las fotos. En este caso, apague el dispositivo y espere hasta que la temperatura descienda.	

## 6. INDICADORES

---

### 6.1. EN LA BASE DE CARGA



#### LED de alimentación

---

ON	Encendido
OFF	Apagado

### 6.2. EN LA CAMARA



#### LED de la batería

---

● ○ ○	Batería muy baja
● ● ○	La mitad de la batería
● ● ●	Batería llena
● ● ●	(Parpadeo) Carga de la batería

#### Modo de captura

---

⌋	Rosa	Hidratación y Sebo
⌋	Rojo	Poros
⌋	Verde	Arrugas
⌋	Azul	Manchas
⌋	Amarillo	UV (Acné)

## 7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

---


No realice reparaciones por su propia cuenta. En caso de avería contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio de Asistencia Técnica o personal cualificado en el fin de evitar funcionamientos incorrectos y peligrosos.

Limpie el aparato utilizando únicamente un paño suave ligeramente humedecido. No utilice gasolina, diluyente ni ningún producto disolvente similar.

Es importante no limpiar la lente de la cámara para no dañarla.

### 7.1. DESECHO DEL EQUIPO

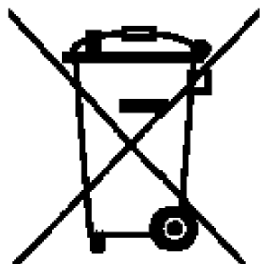

No tire nunca el producto con la basura doméstica. Cuando se quiera desprender de él, deposítelo en un punto limpio. Si no sabe donde se encuentra el más cercano a su domicilio, consúltelo en su ayuntamiento. El embalaje de este producto es reciclable, deposítelo en un contenedor para papel y cartón.

---

**El símbolo del contenedor con la cruz significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que no será gestionado como residuo urbano.**

## 8. DATOS TÉCNICOS

Modelo:	DPLITE2
Fabricante:	DAVI & CIA C/Murcia 35 nave G E08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona – SPAIN
Peso:	0.8 kg (aprox.) – incluyendo la cámara
Dimensiones exteriores máximas:	185 x 220 x 90 (mm)
Alimentación:	12 VDC
Consumo máximo:	1A
Directivas CE aplicables	LVD: Art.3.1.a) EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EMC: Art.3.1.b) ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 RF: Art.3.2) ETSI EN 300 328 V1.7.1 De acuerdo con las regulaciones en la Directiva <b>1999/5/EC</b>

### 8.1. CÁMARA

Sensor de imàgen	5M pixels CMOS
Lente	20X
Iluminación	LED Blanco LED UV LED Blanco polarizado (LED con película polarizante)
Batería	3.7V / 1050mAh Li-Ion Polymer
Tiempo de Operación continua	unos 60 minutos, dependiendo del entorno de usuario
Tiempo de Carga	alrededor de 2 horas
Desinfección	Desinfección con lámpara UV
Dimensiones	58.8 x 150.5 x 58 (mm)

### 8.2. COMUNICACIÓN WIFI

Soporte de Protocolo	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Rango de operación de la cámara	alrededor de 10 m de un dispositivo Wi-Fi conectado
Frecuencia	2.4 GHz ancho de banda



## 9. CERTIFICADO DE GARANTIA

---

Garantizamos **1 año** de garantía a partir de la fecha de adquisición, la garantía comprende los desperfectos que puedan ocurrir a consecuencia del uso normal de su funcionamiento o debido a defectos de fabricación.

Se excluyen todas las piezas móviles como p.ej. cables, equipos de alimentación, etc. Los fallos que recaigan durante el periodo de garantía se subsanarán de modo gratuito presentando la factura de compra del equipo. Otros derechos no pueden tenerse en consideración.

El transporte de ida y vuelta corre a cargo del cliente, si el equipo se encuentra en otro lugar de la sede del cliente.

Sólo se concederán derechos de garantía en casos de daños de transporte, si en el transporte se uso el embalaje original. Por tanto, conserve todas las piezas de embalaje.

Finalizado el periodo de garantía, todos los servicios solicitados serán atendidos por nuestros técnicos especializados, con cargo al usuario de la máquina.

Descargue el manual del software dermoprime desde:  
<http://www.davicia.com/images/manuals/MS05-01.pdf>

**DAVI & CIA**

C/ Murcia, 35 Nave G Pol.industrial Can Calderón.  
E 08830 Sant Boi de Llobregat. Barcelona. Spain

Tel. +34 93 654 32 32  
Fax. +34 93 654 16 62

[info@davicia.com](mailto:info@davicia.com)  
[www.davicia.com](http://www.davicia.com)